

Masque de thérapie LED 3D en silicone liquide

Scan for multilingual user manual



Manuel d'utilisation




Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer et conservez-le soigneusement pour de futures consultations. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, effectuez un test de sensibilité à la lumière.

Consultez les instructions pour plus de détails.



BEAUTY
TECH

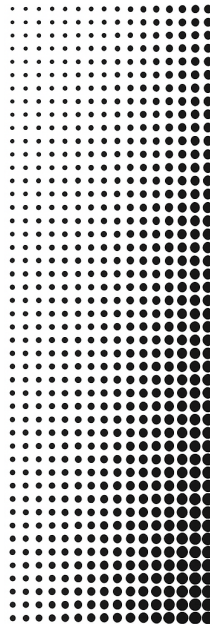

Contenu

1. Description du produit
2. Modes d'utilisation
3. Contrôleur du produit
4. Comment utiliser
5. Spécifications
6. Précautions de sécurité
7. Avertissements

1. Description du produit

Le masque facial en silicone liquide avec thérapie par lumière LED est un appareil domestique rechargeable de photothérapie LED destiné au rajeunissement et à l'embellissement de la peau.

La structure superficielle de ce produit est composée de silicone liquide de qualité médicale, pratique, confortable et facile à utiliser. Il peut s'adapter aux différentes formes de visage grâce à la boucle réglable, s'ajuste parfaitement aux dimensions du visage et permet ainsi à la lumière LED d'atteindre plus efficacement toute la surface faciale. Il offre un meilleur confort et une efficacité accrue pour les zones difficiles à traiter.

Léger et portable, il dispose de 93 lampes LED de haute qualité, avec un total de 279 puces.

Chaque LED émet 3 longueurs d'onde différentes (lumière bleue 415 nm, lumière rouge 633 nm, proche infrarouge 850 nm et infrarouge profond 1072 nm), réglables via le contrôleur sur 3 niveaux d'intensité. Basé sur la théorie de la photothérapie, le rayonnement lumineux pénètre la peau plus efficacement, stimulant la production de collagène et d'élastine, favorisant la régénération cellulaire et procurant un effet de rajeunissement de la peau.

Cet appareil dispose de 2 modes d'utilisation, chacun avec une durée prédéfinie de 10 minutes.

Accessoires inclus:



Contrôleur



Protecteurs oculaires



Sac de rangement



Câble Type-C



Manuel d'utilisation



Bande réglable



2. Modes d'utilisation




Mode 1: 630nm + 850nm + 1072nm



Mode 2: 415nm+850nm+1072nm

3. Contrôleur du produit

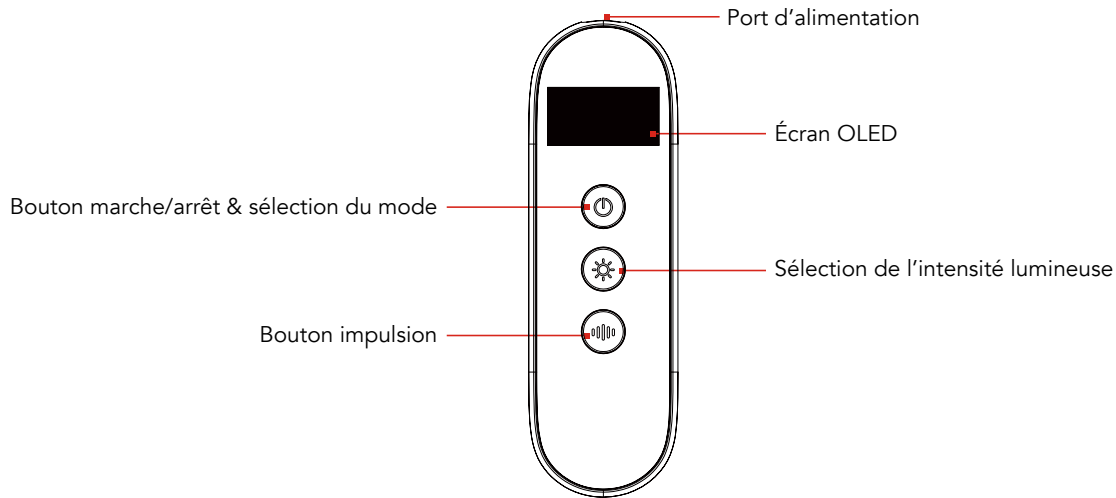

4. Comment utiliser

- Bouton marche/arrêt : Maintenir appuyé environ 3 secondes pour allumer l' appareil ; la lumière s' allume.
- Sélection d' intensité : Appuyer brièvement pour régler et passer entre 3 niveaux de puissance : 50 %, 75 % et 100 %.
- Minuterie : Chaque mode est prédéfini pour une durée de 10 minutes.
- Sélection du mode : Appuyer sur le bouton marche après l' allumage. Deux modes sont disponibles.
- Sélection d' impulsion : Vous pouvez appuyer sur le bouton impulsion dans n' importe quel mode.

5. Spécifications

Instructions de sécurité et d'utilisation



Avertissement: N'utilisez pas ce produit si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Femme enceinte, en préparation de grossesse ou en période d'allaitement.
- Hypersensibilité à la lumière ou traitement avec des médicaments photosensibilisants.
- Maladies héréditaires des yeux ou de la peau (ex. lupus érythémateux, eczéma photosensible, albinisme, etc.).

6. Précautions de sécurité

Étape 1. Test initial sur le bras

- Placez l'appareil sur votre bras.
- Allumez-le et laissez irradier pendant 10 minutes.
- Si des rougeurs, démangeaisons ou réactions apparaissent, cela peut indiquer une photosensibilité cutanée.
→ Dans ce cas, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un dermatologue avant de réessayer.

Étape 2. Préparation avant l'utilisation faciale

- Lavez et séchez soigneusement votre visage.
- Assurez-vous de ne pas porter de maquillage ni de produits cosmétiques, ceux-ci pouvant contenir des ingrédients photosensibilisants.

Étape 3. Réactions normales et signaux d'alerte

- Après utilisation, de légères rougeurs peuvent apparaître ; elles disparaissent généralement en 1 à 2 heures.
- En cas de sensation de brûlure intense ou d'inconfort, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Étape 4. Fréquence et durée recommandées

- 3 à 4 fois par semaine.
- Chaque séance doit durer entre 10 et 20 minutes.

7. Avertissements

- Suivez strictement les instructions d'utilisation. Toute mauvaise manipulation peut entraîner une panne ou un accident.
- N'utilisez pas ce produit pour des affections autres que celles indiquées.
- Les femmes enceintes, allaitantes ainsi que les enfants ne doivent pas l'utiliser.
- Si l'utilisateur présente une maladie physique, sensorielle ou mentale, ou suit un traitement dermatologique (y compris au stade initial de maladies telles que lupus érythémateux, eczéma photosensible, albinisme), l'utilisation n'est pas recommandée sans la supervision d'une personne responsable ou d'un dermatologue.
- En cas de photosensibilité, n'utilisez pas ce produit (risque de réactions cutanées graves).
- Ne pas l'utiliser le même jour que l'application de cosmétiques contenant des ingrédients photosensibilisants.
- Protégez vos yeux : placez correctement les protecteurs oculaires et gardez les yeux fermés. Les personnes atteintes de maladies oculaires génétiques ne doivent pas utiliser ce type de masque.
- En cas d'inconfort, interrompez immédiatement l'utilisation.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne pas immerger ni rincer à l'eau. En cas de contact avec de l'eau, n'utilisez plus l'appareil.
- Ne pas utiliser chez les bébés ou enfants ; tenir hors de leur portée.
- En cas de pièce endommagée, n'utilisez pas l'appareil.
- Réservé à un usage quotidien. Ne pas démonter, modifier ou réparer sans autorisation.